

LANÇAMENTO



Pro-Retract

Fio Retrator Gengival

Desempenho confiável para
resultados de alta precisão



FIO TRICOTADO 

 100% Algodão

*RENDE 20%+
←→
305cm de fio

 EMBALAGEM INTELIGENTE



ESTHETICS



Pro-Retract é um fio retrator tricotado em **100% algodão** que proporciona precisão clínica e um afastamento gengival seguro e eficiente. Com alto desempenho e embalagem inteligente, oferece mais agilidade, controle e segurança ao seu fluxo de trabalho.

Indicação de uso:

Indicado para auxiliar na moldagem de próteses fixas e para afastamento gengival antes de procedimentos de cimentação e restauração.

Excelente adaptação ao sulco gengival



- **Trama tricotada** com espaços internos para **maior eficiência na absorção** de fluidos e líquidos hemostáticos.
- **Inserção e remoção facilitadas**, com expansão adequada e sem desfiamentos, para proporcionar mais segurança e precisão nos procedimentos.



- Fio com **alta flexibilidade e hidrofília**.

Versatilidade de uso

- Solução **não impregnada** para maior abrangência de indicações clínicas.
- **Diversidade de diâmetros:** Ultrafino (000), Extrafino (00), Fino (0), Médio (1) e Grosso (2).



Maior rendimento clínico

***RENDE 20%+**

← →
305cm de fio

Com 305 cm de fio por frasco, **Pro-Retract oferece até 20%* mais aproveitamento**, contribuindo para maior eficiência no dia a dia clínico.

*Quando comparado às apresentações disponíveis no mercado.

Facilidade de manuseio



EMBALAGEM INTELIGENTE

2
Bobina interna:
previne a
formação de nós.

3
Régua:
utilize apenas
o necessário.

1
Área de corte:
evita a contaminação
cruzada.

4
**Visor interno
do produto.**



“ O Pro-Retract se destaca pela facilidade de inserção, pela qualidade da sua trama tricotada e pela maior diversidade de diâmetros, proporcionando melhor adaptação e controle do fluido crevicular. Quero parabenizar a FGM por desenvolver um sistema que, além dessas qualidades, oferece melhor rendimento clínico, com bobina que evita o embolamento do fio e régua na embalagem que facilita o dimensionamento. São detalhes que fazem a diferença na prática clínica.”

Prof. Dr. Leonardo Muniz

Caso clínico

Técnica de moldagem com duplo fio: passo a passo

Autor: Prof. Dr. Luis Fernando Bessel



1

1 | Início da inserção do Fio 000.



2

2 | Inserção do Fio 00.



3

3 | Vista oclusal evidenciando o segundo fio retrator (Fio 00) inserido no sulco gengival.




4

4 | Escaneamento dos preparos.



5

5 | Modelo mestre (gesso) mostrando a cópia das margens dos preparos possibilitada pelo afastamento gengival.

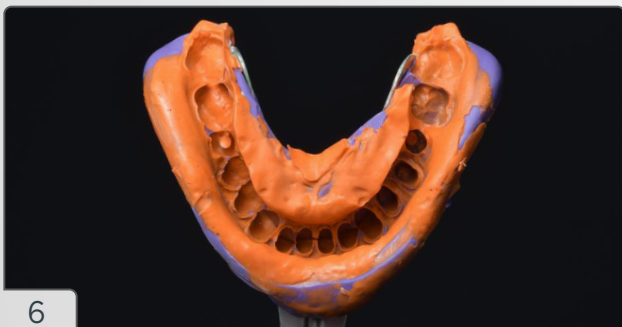

6

6 | Moldagem realizada com Silic-One.



7

7 | Detalhe da moldagem, evidenciando a penetração do material no espaço criado pelo afastamento gengival obtido com o fio retrator.



“ Os fios refratores da FGM são muito fáceis de utilizar, seja pela qualidade da embalagem que facilita a retirada e corte ou mesmo pela qualidade do fio, que não desfia e tem uma densidade que cumpre muito bem a função de afastamento de maneira regular. Além disso, contam com diversos diâmetros que facilitam a escolha e trabalho do Cirurgião-dentista.”

Prof. Dr. Marinho Pedroza Baptista Junior

Apresentação comercial:



Embalagem com 305 cm de fio, disponível nos diâmetros:
Ultrafino (000), Extrafino (00), Fino (0), Médio (1) e Grosso (2).

*Quando comparado às apresentações disponíveis no mercado.

Dica clínica:

Combine o uso com a linha **Silic-One** e garanta a precisão em cada detalhe da sua moldagem!



Verifique as certificações aplicáveis aos produtos

fgmdentalgroup.com



fgmodonto



fgmdentalgroup



FGM Dental Group



fgmdentalgroup



ESTHETICS